

## TOMA DE MUESTRA DE SALIVA


### ANTES DE REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA

1. *Evitar comer, beber, tomar chicles ó limpiarse los dientes al menos **30 minutos antes de la recogida de la muestra (recomendable 2 horas)**. Por el contrario se recomienda enjuagarse la boca a fondo con agua antes de la recogida de la muestra*
2. *No recoger muestras cuando hay enfermedades bucales, inflamación ó lesiones (contaminación por sangre).*
3. *Si existe contaminación visible por sangre esta muestra debe ser descartada.*
4. *Evitar el tabaco y regaliz el día de la toma de muestra.*

### INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS

1. *Efectuar la recogida de saliva a las 23h.*
2. *Extraiga del **Salivette**® el tubo interior (c) y quite el tapón (a).*
3. *Extraiga del interior del **Salivette**® la torunda (b).*
4. *Masticar suavemente la torunda durante un minuto. En cualquier caso, mantener la torunda en su boca hasta que note que no puede evitar tragar la saliva producida.*
5. *Devolver la torunda (b) empapada en saliva al tubo interior, colocar éste en el portatubo (d) y cerrar bien el **Salivette**® con el tapón (a)*
6. *Rellenar la etiqueta del tubo (d) indicando la hora de recogida.*
7. *Mantenga el **Salivette**® en la nevera hasta devolverla al Laboratorio.*

**IMPORTANTE: No usar este producto en niños menores de 3 años ó en pacientes con alto riesgo de atragantarse.**

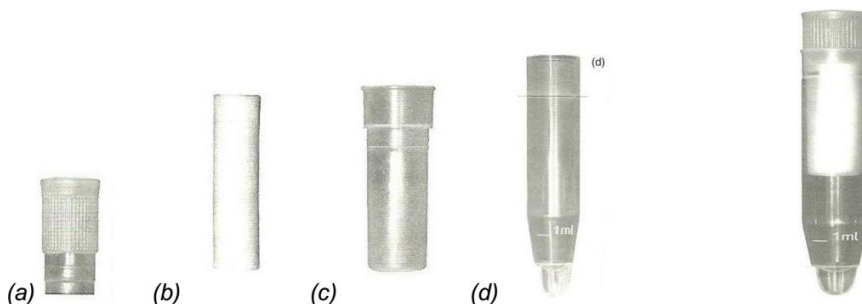

*Unidad de Bioquímica Clínica*