

## Cómo administrar QUINSAIR

Quinsair se debe administrar por inhalación utilizando un **nebulizador de mano Zirela** (que incluye un cabezal aerosol Zirela). Este debe estar conectado o bien a un controlador eBase o bien a una unidad de control eFlow rapid.

Vídeo explicativo de cómo utilizar el dispositivo eFlow Rapid de PARI:

<https://www.youtube.com/watch?v=1gauS6PB1gs&t=15s>

### Información que es importante conocer antes de empezar

- Cada ampolla es **solamente para un solo uso. Una vez abierta la ampolla, el contenido se debe utilizar inmediatamente.**
- No use Quinsair si nota que el sobre o las ampollas han sido manipulados.
- No use Quinsair si nota que está turbio o hay partículas en la disolución.
- **No mezcle Quinsair con ningún otro medicamento** en el nebulizador de mano Zirela.
- No introduzca ningún otro medicamento distinto a Quinsair en el nebulizador de mano Zirela.
- No intente inhalar Quinsair utilizando ningún otro tipo de nebulizador de mano.
- Compruebe que su sistema nebulizador Zirela funciona correctamente antes de iniciar su tratamiento.
- No trague el líquido de la ampolla.

### ¿Cómo debo preparar mi sistema nebulizador para inhalar el medicamento?

Guarde las instrucciones de uso de Zirela en lugar seguro, ya que detallan cómo montar el dispositivo.

1. **Asegúrese de colocar el nebulizador de mano Zirela** sobre una superficie horizontal y estable.
2. **Introduzca todo el contenido de una ampolla** en el depósito para el medicamento del nebulizador de mano Zirela (Figura 1). Asegúrese de vaciar la ampolla completamente, dando unos golpecitos contra el lado del depósito si fuera necesario.



Figura 1

3. **Cierre el depósito del medicamento** alineando las lengüetas de la tapa del medicamento con las ranuras del depósito (a). Oprima y gire la tapa en sentido horario hasta donde sea posible (b, Figura 2).

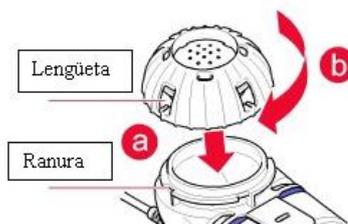


Figura 2

### ¿Cómo inicio el tratamiento?

1. **Para comenzar su tratamiento**, siéntese en una posición relajada y erguida.
2. **Sujete el nebulizador nivelado**, pulse y mantenga pulsado el botón on/off del controlador durante unos pocos segundos. Oirá un pitido y la luz de estado se pondrá verde.
3. **Después de unos pocos segundos, una nube de aerosol empezará a fluir** hasta la cámara del aerosol del nebulizador de mano Zirela. Si no empieza a fluir la nube de aerosol, intente solucionarlo consultando las instrucciones de uso del fabricante de Zirela.
4. **Manteniendo nivelado el nebulizador**, introduzca la boquilla en la boca y cierre los labios alrededor de la misma (Figura 3).

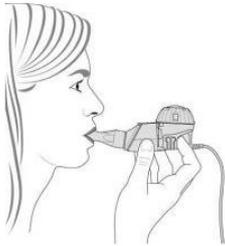


Figura 3

5. **Respire normalmente** (inhale y exhale) a través de la boquilla. Intente no respirar por la nariz. Continúe inhalando y exhalando cómodamente hasta que el tratamiento se haya acabado.  
Se tarda alrededor de 5 minutos en inhalar el medicamento con el nebulizador.
6. **Cuando se haya liberado todo el medicamento**, oirá dos pitidos, que significan que el tratamiento se ha completado.
7. **Una vez completado, abra la tapa del medicamento** para asegurarse de que se ha utilizado todo el medicamento. Puede que queden algunas gotas de medicamento en el fondo del depósito al final del tratamiento. Esto es normal. No obstante, si queda más cantidad que unas gotas, vuelva a colocar la tapa y reanude el tratamiento.
8. **Una vez completado el tratamiento**, desconecte el controlador y desmonte el nebulizador de mano Zirela para limpiarlo y desinfectarlo. Las instrucciones de uso del fabricante recogen todos los detalles sobre la limpieza y desinfección.

Si por cualquier motivo necesita **parar** el tratamiento antes de que se acabe, **pulse y mantenga pulsado el botón on/off del controlador durante un segundo**. Una vez apagado del todo y cuando esté listo para reanudarlo, vuelva a pulsar y mantener pulsado el botón on/off durante un segundo. El tratamiento se reanudará. Ahora debe inhalar y exhalar a través de la boquilla como antes.

Se debe usar un nebulizador de mano Zirela durante un ciclo de tratamiento de 28 días. Consulte la información sobre limpieza y almacenamiento en las instrucciones de uso del fabricante.